



000/0020.130/30

Silwo, siliconen schuimverband

Silwo, superabsorberende pleisters met zachte siliconen wondcontactlaag, behoren tot het MExT sensitive productgamma. Geschikt voor exsuderende wonden. Silwo pleisters voelen comfortabel en zacht aan. Aangenaam draagcomfort.



Eigenschappen

- Afmetingen: 8.5x5cm (rechthoekig), 7.5x5cm (ovaal).
- Huidkleurige pleisters met geavanceerde vijfslagige structuur:
 1. Zachte siliconen wondcontactlaag: voorkomt geïrriteerde huid,
 2. Superabsorberende laag uit polyacrylaatvezel,
 3. Non woven absorptielaag,
 4. Laag uit polyurethaanschuim: Zacht en dik schuimkompres. Groot absorptievermogen; beschermt tegen schokken.
 5. Dampdoorlatende en waterbestendige polyurethaanfilmlaag: laat de huid ademen; vormt een barrière tegen bacteriën.


- Siliconencontactlaag: gunstige invloed op littekenvorming; pijnloos te verwijderen; geen huidbeschadiging; goede fixatie.
- Pleister is herpositioneerbaar, kan meermaals opnieuw aangebracht worden.
- Pleisters zijn individueel en steriel verpakt.

Toepassingen

- Breed scala aan exsuderende wonden zoals doorligwonden, been- en voetzweren, traumatische wonden, chirurgische wonden en huidscheurtjes.
- Geschikt voor gevoelige huid.
- Eenmalig gebruik.

Gebruik

- Ontsmet de wond.
- Verwijder de schutbladen en breng aan op droge, propere huid.
- Vervang regelmatig.

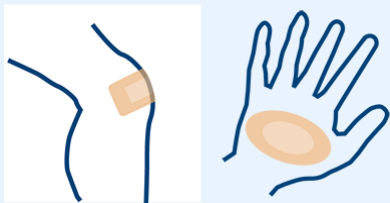

Inhoud

- Doos 2x6 stuks
- Bijsluiter

Bewaring

- Bewaren tussen 5°C en 40°C.
- Vervaldatum: 36 maanden na productiedatum.

Silwo is een medisch hulpmiddel.

Versie: 19/05/2024